

LÁMPARA DE OPERACIONES RODABLE CON BATERÍA

MARCA: TECHNOMED

MODELO: TMI HEX 126



Luz sin sombras, función de memoria, mango esterilizable de alta calidad, con vidrio protector de seguridad ESG resistente al fuego a prueba de arañazos, proceso de desinfección rápido, protege los rayos UV e IR y mejora la penetración de la luz. Con diseño europeo especial para ventilación de calor. El cuerpo está hecho de polímero resistente al fuego de alta calidad.

CONFIABLE Y EFECTIVO

El diseño de la forma del cabezal de luz cumple con los requisitos del quirófano de flujo laminar moderno.

El diseño abierto de la luz reduce el área de la superficie que impide el flujo de aire desde el techo de suministro de aire, lo que resulta en un flujo menos turbulento debajo de la luz.

- La superficie del faro es totalmente cerrada es muy fácil de descontaminar.
- La placa de lentes del cabezal de luz es duradera, resistente al envejecimiento y fácil de limpiar.
- Los mangos de los cabezales de luz se pueden quitar fácilmente para remojarlos y desinfectarlos en autoclave

AVANCES Y PERFECCIONAMIENTO

Campo de luz efectivo supra máximo : Con alta intensidad de luz y gran tamaño de punto, la profundidad de campo proporciona una buena iluminación sin tener que volver a enfocar cuando cambia la ubicación de la herida quirúrgica. El cabezal de la luz se puede colocar lejos de la herida para garantizar un mejor flujo laminar.

Panel de Control: Encendido/apagado, Intensidad de iluminación, Temperatura de color, Modo de iluminación Endo, Función de memoria.

Modo Endo: Para cumplir con el requisito de baja iluminación ambiental.

- Modo General: Combinación (luces amarillas y blancas)
- Mondo Endo: Luces amarillas.

Función Memoria: El beneficio de la función de memoria es que la intensidad de la luz con un solo toque se ajusta automáticamente al 50 % de los LED blancos y al 50 % de los LED amarillos.

Vidrio de seguridad para protección de lentes: Ofrecemos luces LED con cubierta protectora de vidrio de seguridad ESG resistente al fuego a prueba de arañazos, proceso de desinfección rápido y mejora de la penetración de la luz. Está hecho de vidrio de seguridad monocapa que protege la lente de los rayos ultravioleta e infrarrojos.

Mango esterilizable: Proporcionamos mango esterilizable de alta calidad. El brillo de los diferentes LED se ajusta automáticamente para cambiar el tamaño del punto, lo que evitará la posible aparición de fallas mecánicas.

ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

LÁMPARA DE OPERACIONES RODABLE CON BATERÍA

MARCA: TECHNOMED

MODELO: TMI HEX 126




ILUMINACIÓN SIN SOMBRAS

Gracias a la gran cantidad de luces LED y la posición de emisión múltiple de las fuentes de luz LED, cualquier obstrucción con la cabeza, el hombro o las manos del cirujano no afectará el área de la herida quirúrgica con sombras proyectadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Iluminación: 160,000 LUX \pm 10%
- Tamaño del campo de luz: 12-30 cm
- Temperatura de color: 4000 - 5000 °K
- Índice de reducción de color: 93 RA
- Números de LED's: 126
- Vida útil de la lámpara LED: >50 000 Hrs.
- Diámetro de la Luz: 500 mm
- Control de luminosidad: Panel táctil capacitivo
- Iluminación ajustable: 0% al 100%
- Color de LED: Blanco y amarillo (doble color)
- Enfoque: Ajustable
- Profundidad de iluminación: 1200 mm
- Voltaje: 220V

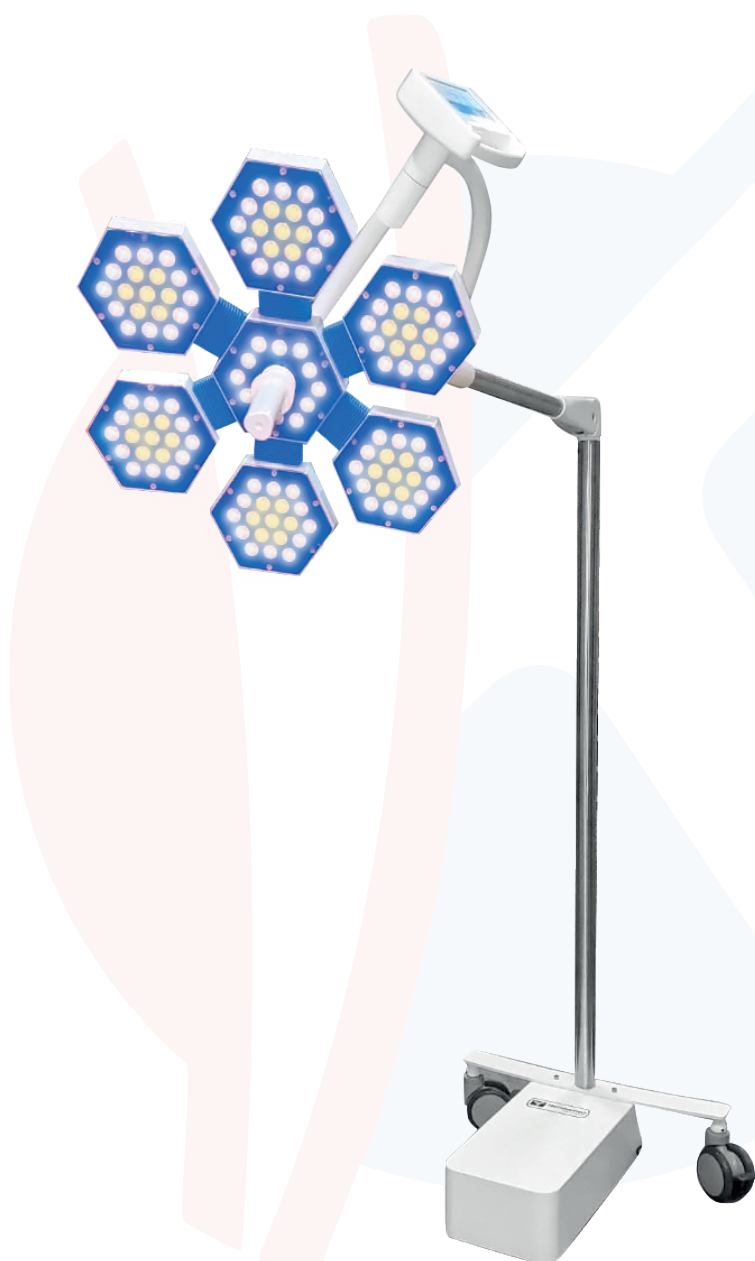

ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe