

MESA OBSTÉTRICA MECÁNICA

MARCA: COMAP

MODELO: KL-2C




La mesa KL-2C es un tipo cama obstétrica integrada es apta para la realización de partos inmediatos, cirugía ginecológica, diagnóstico y examen, etc.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

- El asiento base y la cubierta de la columna vertical están hechos de acero inoxidable 304 de alta calidad que es anticorrosivo y se puede limpiar fácilmente.
- La cama principal y la cama auxiliar están conectadas entre sí, la mesa auxiliar es fácil de desmontar.
- Cuenta con un pedal que eleva hidráulicamente la mesa. Tiene un anillo de sellado tipo Y importado y duradero.
- Equipado con lavabo de acero inoxidable y otros accesorios.
- El colchón está envuelto con cuero artificial importado. La esponja con memoria de alta densidad está formada en una sola pieza, sin costura.
- Equipado con dispositivo de freno que es fácil de mover la mesa.
- Las pierneras se pueden girar 180°. También se puede utilizar para pedal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Largo: 1950 ±50mm
- Ancho: 600 ±10mm
- Ajuste de altura: (700 – 900) ±50mm
- Trendelenburg / Trendelenburg inverso: $\geq 10^\circ$ / $\geq 20^\circ$
- Tablero trasero hacia arriba: $\geq 50^\circ$
- Tablero trasero hacia abajo: $\geq 3^\circ$
- Tablero de piernas hacia afuera: $\geq 90^\circ$
- Área de trabajo largo / ancho mm: 600 x 600

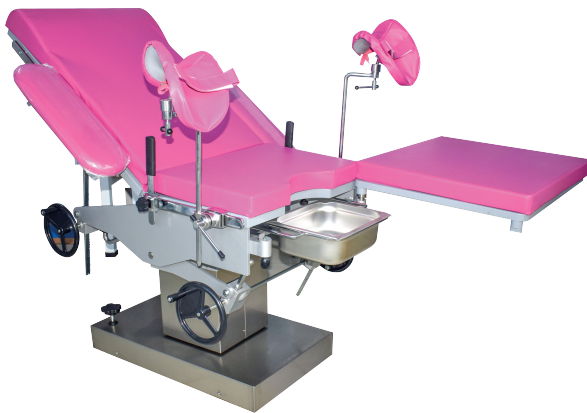

ÁREA COMERCIAL:



969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700



ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:



944 640 865



asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe